

CleanTrust™

Wymazówki do detekcji białek

Test ten jest przeznaczony do wykrywania zbytkowych białek na oczyszczonych powierzchniach i jest gotowy do natychmiastowego użycia. Po pobraniu próbki (wymazu z powierzchni) obecność lub brak zbytkowych białek wykrywana jest za pomocą reakcji chemicznej, w której białka reagują z odczynnikami detekcyjnymi. W przypadku obecności białek kolor roztworu zmienia się z zielonego na fioletowy. Im szybsza i ciemniejsza jest zmiana koloru, tym wyższa jest zawartość białek.


Korzyści

- Łatwe pobieranie próbek
- Efektywny pobór próbek z trudnych powierzchni



Czułość

- 80 ug po 1 minucie
- 50 ug po 5 minutach
- 20 ug po 10 minutach

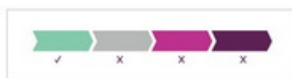

Łatwe pobieranie próbek, 20 sztuk w opakowaniu

Inteligentna konstrukcja do pobierania próbek z różnych powierzchni

